

Центр соціальних
експертиз
ім. Юрія Саєнка
Інституту соціології
Національної Академії
Наук України

ЦЕНТРЕСЕР

The Center of social
expertises named
after Yuri Saenko
of the Institute of sociology
of National Academy
of sciences of Ukraine





[illegible]













 колір скарифікатора може відрізнятися

- 1 Перевірте термін придатності тесту
- 2 Ознайомтеся з компонентами
- 3 Перевірте їх на предмет пошкоджень
- 4 Прогрійте тест до кімнатної температури



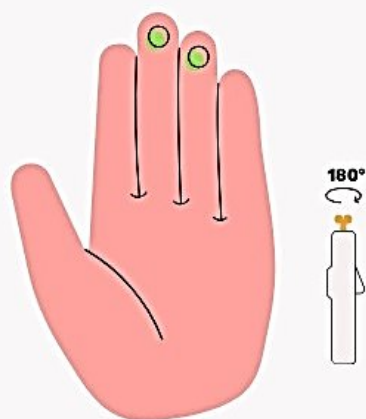


Оберіть середний або безіменний палець, викрутіть ланцет із скарифікатора..

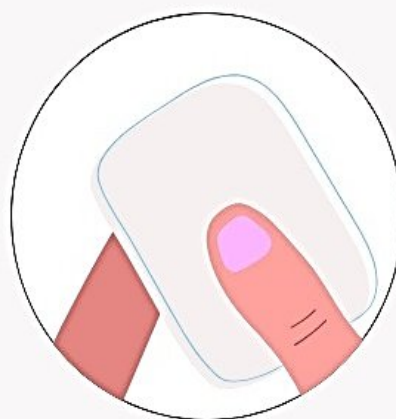


Протріть палець спиртовою серветкою для стерилізації.




Піднесіть скарифікатор, натисніть на

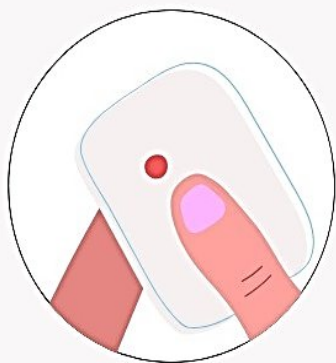


Зітріть першу краплю крові сухим ватним диском або чистою сухою серветкою.

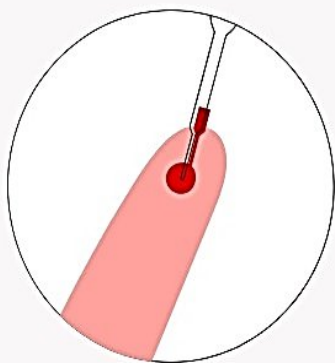


За допомогою піпетки почніть збирати кров.

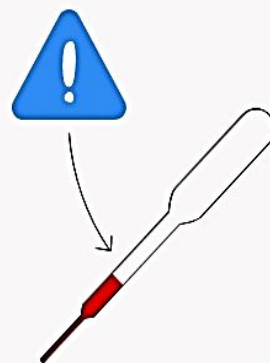

Набрати одну краплю крові (приблизно 10 мікролітрів).

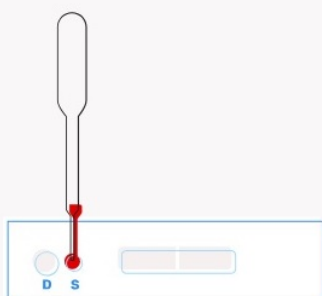

Капніть кров у лунку S тест-касети, не торкаючись дна. Це може пошкодити мембрану.

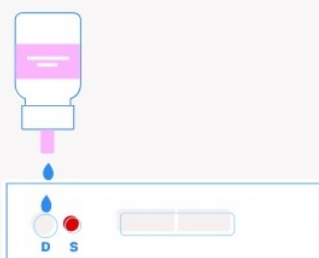

Потім в лунку D додайте дві краплі (приблизно 80 мікролітрів) буфера (розчинника).




Зачекайте 15 хвилин до повної появи результату тесту.

Оберіть ваш результат:

Ваш результат: негативний

Негативним вважається результат при появі однієї чіткої кольорової лінії в контрольній зоні (C). Кольорова лінія на тестовій ділянці (T) відсутня.


Згідно результату тесту, тест не ідентифікує антитіла до ВІЛ у вашому організмі. Однак варто враховувати, що тест має обмеження у виявленні ВІЛ-інфекції в період вікна (перші тижні після інфікування). Якщо вас мотивувала пройти тест потенційно небезпечна ситуація, що відбулася протягом даного терміну, рекомендуємо пізніше повторно пройти тест, а також ознайомитися з інформацією про ВІЛ-інфекцію, заходами безпеки і профілактики. Негативний результат самотестування на ВІЛ не повинен використовуватись для обґрунтування ризикової поведінки, такої як секс без презерватива.

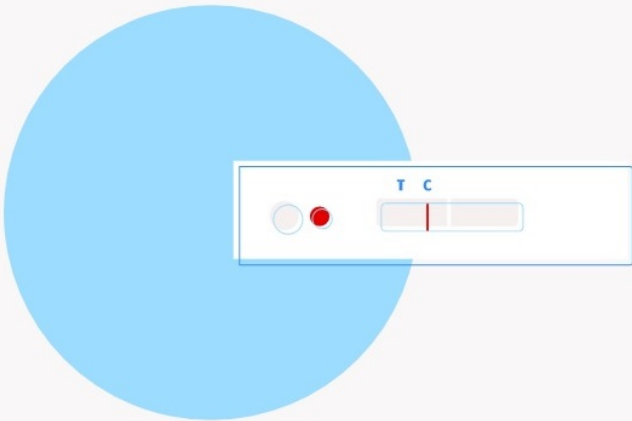

< Я вибрав не той варіант

Ваш тест недійсний


На жаль, таке іноді трапляється. Недійсним вважається результат при відсутності лінії в контрольній зоні (C). Причиною недійсного результату тестування може бути недостатня кількість досліджуваного зразка, недотримання процедури тестування, недотримання термінів придатності та умов зберігання тесту. Вам необхідно повторити дослідження з використанням іншої тест касети.

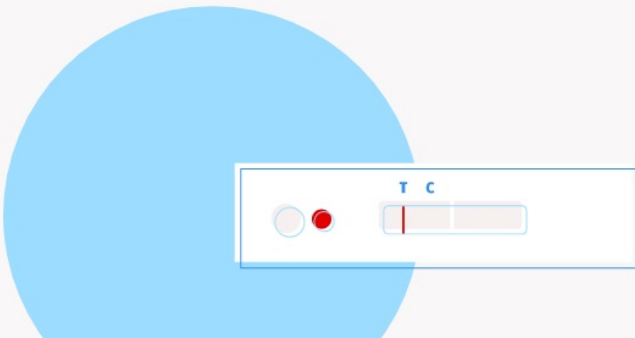

< Я вибрав не той варіант

Ваш тест недійсний

На жаль, таке іноді трапляється. Недійсним вважається результат при відсутності лінії в контрольній зоні (C). Причиною недійсного результату тестування може бути недостатня кількість досліджуваного зразка, недотримання процедури тестування, недотримання термінів придатності та умов зберігання тесту. Вам необхідно повторити дослідження з використанням іншої тест касети.

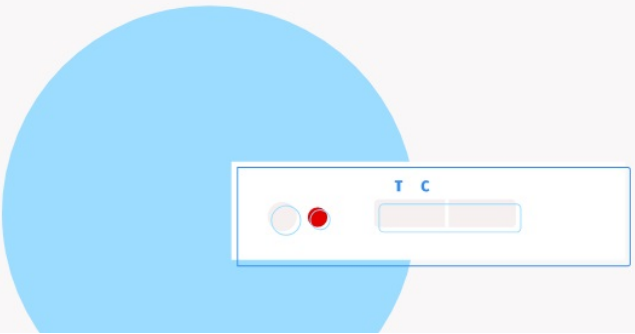

Ваш результат: ПОЗИТИВНИЙ

Позитивним вважається результат при появі двох чітких кольорових ліній. Одна лінія повинна з'явитися в контрольній зоні (C), друга лінія - в тестовій зоні (T) тесту.


Не варто завчасно переживати. Навіть найточніші тести інколи помиляються. Ви зробили дійсно важливий перший крок у з'ясуванні свого ВІЛ-статусу. Якщо ваш результат тесту є позитивним, це має бути підтверджено в медичному закладі. Рекомендуємо вам звернутися в один із центрів довіри для повторного тесту та консультації фахівців (спеціалістів).

У разі виявлення ВІЛ ви маєте знати, що це кероване захворювання.

Ви вагаєтеся чи звернутися до медичного закладу для перевірки позитивного результату швидкого тесту на ВІЛ? Вирішення цього питання якомога швидше, має дві величезні переваги:

Якщо результат підтвердиться Ви зможете розпочати лікування якнайскоріше. При правильному та своєчасному лікуванні, ви можете жити активним та здоровим життям. Рання діагностика та лікування є надзвичайно важливими – лікування ефективно перешкоджає ушкодженню вашої імунної системи.

Знання свого ВІЛ статусу дозволяє приймати правильні рішення щодо того як знизити або запобігти ризикам для вас і ваших партнерів. Ви можете вжити запобіжних заходів, щоб не допустити передачі ВІЛ іншим людям.

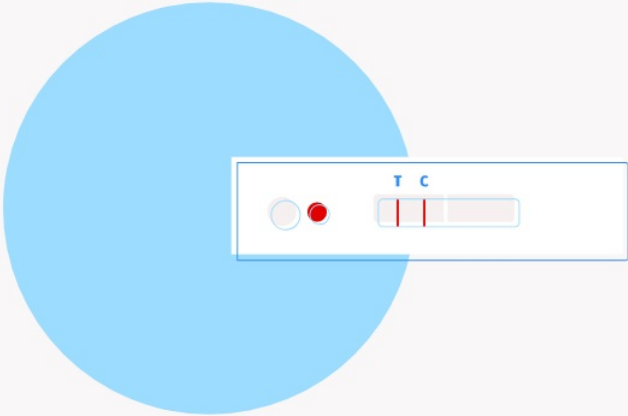





--	--

--	--

--	-------------

--	-------------

--	--